

Réussir la vaccination intranasale

Préparation & choix du matériel




Fiche pratique

VACCINATION
RESPIRATOIRE
BOVINS

1. Le bon dispositif d'administration

Le matériel doit être **propre** et adapté au **volume** à administrer.
À usage vaccins uniquement.

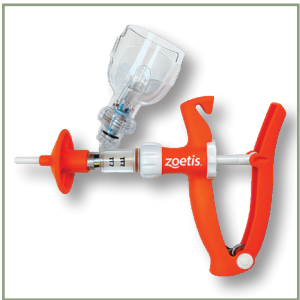

- 2+4 ml : RIS106G4
- 1+2 ml (veau de boucherie) : RIS17F18



- 25 ml : RIN177J14
- 50 ml : RIN171B12




Seringue UU Luer Lock :
RIN03L6

Pour la vaccination de **petits lots** : utiliser une **seringue à usage unique (UU)** avec un embout « Luer Lock ». L'administration à des **lots d'animaux** est plus facile avec un **pistolet**.

T-NOSE : bloc-nasaux

Grâce à sa circonférence et à sa souplesse, il peut être utilisé sur **des animaux de tout âge**. Il permet une **facilité d'administration** pour le bien-être des animaux et s'adapte à **tout type de pistolet et seringue**.

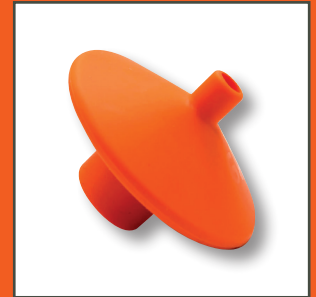

T-Nose : RIS5K18

Conseils pratiques de préparation



Respect de la notice

Vérifier la **dose exacte à administrer**.



Contention sécurisée

Immobiliser l'animal avant tout geste pour votre **sécurité** et la **précision d'administration** (lève-tête, cornadis, licol).




Température du vaccin

Conserver les vaccins au **réfrigérateur**, dans leur **emballage d'origine à l'abri de la lumière jusqu'à utilisation**.

Geste technique & nettoyage du matériel

2. Vaccination de quelques animaux

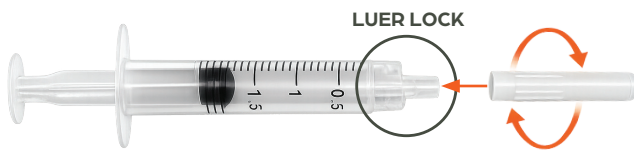

- ▶ Visser la canule sur la seringue.
- ▶ Bien tenir la seringue dans la main : seule la canule dépasse.
- ▶ Lever la tête du veau.
- ▶ Administrer dans une narine.

3. Vaccination en lot



- ▶ Visser la canule intranasale au pistolet.
- ▶ Rentrer la canule par la base du T-Nose et enfoncer jusqu'à la butée.
- ▶ Insérer le flacon sur le porte flacon ou pomper le vaccin reconstitué (aiguille UU neuve) selon le pistolet utilisé.
- ▶ Régler le volume de la dose à administrer.
- ▶ Bien tenir la tête de l'animal vers le haut.
- ▶ Administrer dans une narine.

La dose s'administre sous forme de nébulisation : **maintenir la tête du veau légèrement relevée quelques secondes après administration.**

ERREURS À ÉVITER ABSOLUMENT



- **Trop de réutilisations d'une canule** : augmente les risques de contamination. Changer de canule entre chaque animal.
- **Matériel contaminé** : risque majeur d'infection. Utilisez du matériel stérile.

4. Entretien du matériel

Nettoyage immédiat

Démonter le dispositif d'administration. Le rincer abondamment à l'eau chaude pour éliminer tout résidu de produit. ⚠ **Pas de désinfectants** : ils peuvent altérer l'efficacité du vaccin.

Séchage et stockage

Laisser sécher les éléments à l'air libre avant de les remonter. Les stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri de la poussière.

Entretien

Vérifier l'étanchéité des joints.